



AG04
P R O

PROMED
MEDICAL COMPANY

DESIGN : LA TECHNOLOGIE MISE EN VALEUR PAR LA FORME

Dans l'**AG04 PRO**, le design, l'ergonomie et le confort représentent une combinaison idéale capable de valoriser au maximum le travail du dentiste.

Le fauteuil est profilé pour faciliter les mouvements de l'opérateur, assurant ainsi un soutien parfait du patient.



3 ANS
DE GARANTIE

À PARTIR DE
5.232€

Promotion valable jusqu'au 30/01/2024
Les prix s'entendent TTC applicables en France.
Transport et montage exclus.

TRENDELENBURG

Le mouvement de Trendelenburg, combiné au basculement du dossier, assure une posture confortable pour le patient et une position de travail correcte pour les opérateurs.

Le point d'appui rotatif du dossier dans l'axe de l'articulation fémorale évite l'effet de spoliation et la remise en position du patient qui en découle.



REMBOURRAGE CHIRURGICAL



Grâce aux caractéristiques du matériau utilisé, le rembourrage chirurgical augmente le volume de la surface du fauteuil, en s'adaptant à sa corpulence et en distribuant uniformément la pression.

Le rembourrage chirurgical garantit toujours un soutien anatomique correct et un excellent confort, en favorisant la relaxation du patient, en particulier pendant les séances prolongées.



AG04 PRO

- Mouvements électromécaniques de levage, d'abaissement et de basculement ;
- Inclinaison compensée du dossier, jusqu'à la position horizontale ;
- Dossier anatomique, enveloppant et mince pour une fonctionnalité maximale dans le traitement pour le dentiste ;
- Appui-tête anatomique multiarticulé UNI pour une position confortable du patient et une visibilité parfaite pendant le traitement ;
- Rembourrage enveloppant de haute qualité et revêtement sans couture ;
- Personnalisation possible avec différentes couleurs de polyuréthane et de tissu en similicuir ;
- Boîte à outils intégrée ;
- Symétrie totale pour les professionnels droitiers ou gauchers ;
- Couleur Total Blanc RAL 9010 ;
- Commande à palette sur la base pour des mouvements rapides et efficaces de l'assise sans l'utilisation des mains ;
- Butées de sécurité sur le dossier et sur le bras à pantographe ;
- Retour au programme automatique position « Zéro » ;
- Possibilité de programmer 3 positions de travail différentes ;
- Accoudoir gauche fixe en aluminium blanc (OPTION) ;
- Accoudoir droit rabattable en aluminium blanc, pour améliorer l'accessibilité du fauteuil et fournir un soutien naturel aux bras, en permettant une position détendue pendant le traitement (OPTION) ;
- Rembourrage chirurgical (OPTION).

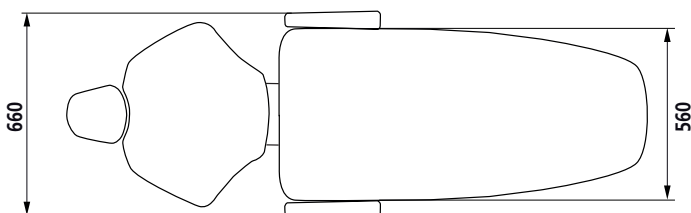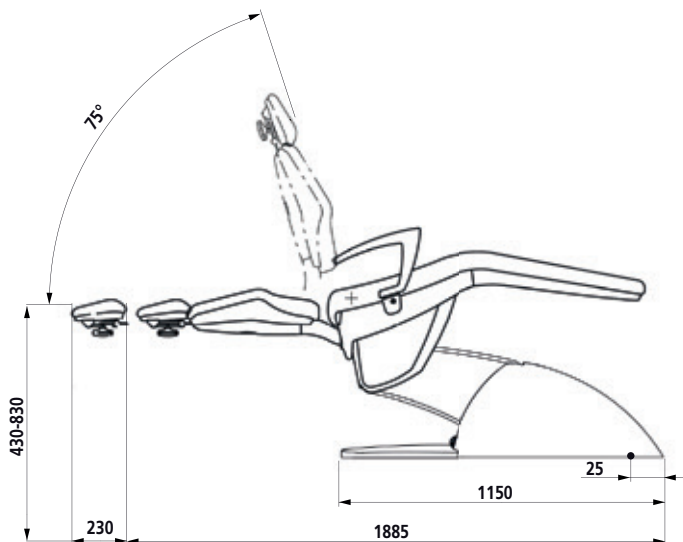

PROMED

M E D I C A L C O M P A N Y

Promed srl - Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39.051.780465 - www.promeditaly.it

MADE IN ITALY



Commande à pédale

(STANDARD)

Permet d'activer les mouvements du fauteuil, les programmes de travail et la remise à zéro.



Accoudoir gauche fixe en aluminium blanc

(OPTION)

Accoudoir droit rabattant en aluminium blanc

(OPTION)



Kit de stabilité

(OPTION)



Support de lampe

(OPTION)



Bras porte-plateau

(OPTION)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur maximale	mm	820
Hauteur minimale	mm	420
Angle d'inclinaison du dossier	°	-10/+63
Largeur	mm	550
Longueur (sans appui-tête)	mm	1700
Longueur (avec appui-tête)	mm	2050
Poids brut	Kg	155
Poids net	Kg	131
Capacité de levage maximale (patient + unité)	Kg	230
Classification		I
Type		B